

IAP15 Rec'd PCT/PTO 25 APR 2006

明 細 書

酸化損傷グアニン化合物とこれの濃度補正物質の同時分析方法及び
この分析方法に用いる分析装置

技術分野

[0001] 本発明は、酸化損傷グアニン化合物と、この酸化損傷グアニン化合物の濃度補正物質との同時分析方法、特に8-ヒドロキシデオキシグアノシン(以下、適宜「8-OH-dG」という。)と、7-メチルグアニン(以下、適宜「7-MG」という)又はクレアチニン(以下、適宜「Cre」という。)との同時分析方法、及びこれを実施するための分析装置に関する。

背景技術

[0002] 近年、生体内での活性酸素の作用について多くの研究がなされている。通常、活性酸素は生体内に異物が侵入した際、防御システムとして働いている。しかしながら、食品添加物(発ガン性物質)、大気汚染、喫煙、ストレス等によって過剰に活性酸素が発生すると、それらはDNAの損傷を引き起こし、酸化損傷DNA産物の一種である8-OH-dGを生成する。この8-OH-dGは突然変異を誘発し、発癌過程で重要な役割を演じていると考えられている。また、活性酸素は、発癌だけでなく様々な疾患や老化の原因として注目されている。

そのため、生体内における活性酸素量を知ることにより、個人個人の発癌リスク評価や、活性酸素関連の様々な疾患の予測・診断、老化度、あるいは一般健康の評価を行うことができる。

しかしながら、生体内における活性酸素は不安定であり、それらを直接検出するのは困難である。そのため、活性酸素の指標として活性酸素によって生成される8-OH-dGを測定することが提案されている。8-OH-dGの分析方法としては、(1)8-OH-dGに対する抗体を結合させたアフィニティカラムで精製した分画をHPLC-ECDで分析する方法、(2)2本の逆相カラムの間にカーボンカラムを接続してカラムスイッチング法により、最終的に8-OH-dGをHPLC-ECDにより検出する方法(非特許文献1)、(3)サンプリングインジェクター(一定分画を分取し、攪拌後、一定量をカラムに

注入する装置)を介してマルチファンクションカラム(逆相カラム、陽イオン交換カラムの機能を併せ持つゲル濾過カラム)と、逆相カラムを接続しECDにより検出する方法(非特許文献2)等が報告されている。

非特許文献1:ボグダノフら(Bogdanov, M., B., et. al.)、フリー・ラジカル・バイオロジー・アンド・メディスン(Free Rad. Biol. Med.)、1999年、第27巻、p.647-666

非特許文献2:カサイら(Kasai, H., et. al.)ジャパニーズ・ジャーナル・オブ・キャンサー・リサーチ(Jpn. J. Cancer Res.)、2001年、第92巻、p.9-15

非特許文献3:トッパら(Topp, H., et. al.)、アナリティカル・バイオケミストリー(Anal. Biochem.)、1987年、第161巻、p.49-56

発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0003] 生体中の8-OH-dGの値は、多くの場合、時間により変化する。そこで、8-OH-dGを正確に定量する場合、24時間分の試料を用意するか、8-OH-dGに対する濃度補正物質を用いて8-OH-dGの濃度補正をすることが必要になる。

上述の方法においては、濃度補正物質を用いて濃度補正をすることにより8-OH-dGを定量する場合、試料を最低2本の容器にとり、1本を8-OH-dG自体の分析に用い、もう1本を濃度補正物質(例えば、クレアチニン(Cre))の分析に用い、両物質の測定値から算出される値(例えば、(8-OH-dG/Cre))を酸化的DNA損傷の指標としていた。そのため、試料の採取・保存・分析・データの解析において煩雑な手続きが必要であった。

- [0004] 本発明は、かかる状況に鑑みてなされたものであり、酸化的損傷グアニン化合物と、この酸化的損傷グアニン化合物の濃度補正物質とを効率よく分析することができる方法、及びこの方法を実施するための分析装置を提供することを課題とする。

課題を解決するための手段

- [0005] このような事情に鑑みて、本発明者は鋭意検討の結果、8-OH-dGの濃度補正物質である7-メチルグアニン、クレアチニンを8-OH-dGと同時に分析する方法、及びこれに用いる装置により、上記課題を解決することができることを見出し、本発明を完成した。

7-MGは、代謝率 (metabolic rate, MR) と関係するRNA分解物であり、RNAの分解産物であるプソイドウリジンと一定の比率で尿中に排せつされることが知られており (非特許文献3)、また、クレアチニンの濃度と7-MGの濃度には強い相関があることも分かっている。したがって、7-MGによって8-OH-dGの値を補正した(8-OH-dG/7-MG)値は、クレアチニンによって8-OH-dGの値を補正した(8-OH-dG/Cre)値と同等の信頼度を持つ酸化損傷の指標となる。

[0006] 同様に、他のRNA分解物であるプソイドウリジン、N2, N2-ジメチルグアノシン、N6-スレオニノカルボニルアデノシン等によっても補正は可能と考えられる。

[0007] 即ち、本発明の第1の発明は、試料中に含まれる、DNA又はRNA又はヌクレオチド中のグアニンが損傷を受けた結果生じる酸化損傷グアニン化合物を陰イオン交換カラム(HPLC-1)で精製する工程と、前記酸化損傷グアニン化合物を検出器で測定する工程とを有することを特徴とする酸化損傷グアニン化合物の分析方法である。

このような構成をとることにより、前記酸化損傷グアニン化合物を、簡便に分析できるので、試料の採取・保存・分析・データの解析において労力・時間をほぼ半減させることが可能となる。

また、本発明は、多量の溶離液や洗浄液を必要とせず、有毒の廃液の発生も少ないので、環境面でも優れている。

[0008] 本発明の第2の発明は、前記酸化損傷グアニン化合物が、8-ヒドロキシデオキシグアノシン(8-OH-dG)及び/又は8-ヒドロキシグアニン(8-OH-Gua)である第1の発明に記載の酸化損傷グアニン化合物の分析方法である。

[0009] 本発明の第3の発明は、試料中に含まれる、DNA又はRNA又はヌクレオチド中のグアニンが損傷を受けた結果生じる酸化損傷グアニン化合物を陰イオン交換カラム(HPLC-1)で精製する工程と、前記試料中に含まれる、前記酸化損傷グアニン化合物の濃度補正物質を検出器で測定する工程と、前記酸化損傷グアニン化合物を検出器で測定する工程とを有し、前記酸化損傷グアニン化合物と前記濃度補正物質とを一時に分析することを特徴とする酸化損傷グアニン化合物の分析方法である。

- [0010] この方法によれば、前記酸化的損傷グアニン化合物と、前記酸化的損傷グアニン化合物の濃度補正物質とを、同時に分析できるので、試料の採取・保存・分析・データの解析において労力・時間をほぼ半減させることが可能となる。
- [0011] 本発明の第4の発明は、前記酸化的損傷グアニン化合物が、8-ヒドロキシデオキシグアノシン(8-OH-dG)及び／又は8-ヒドロキシグアニン(8-OH-Gua)であり、前記酸化的損傷グアニン化合物の濃度補正物質が、7-メチルグアニン(7-MG)及び／又はクレアチニン(Cre)である第3の発明に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法である。
- [0012] 本発明の第5の発明は、試料中に含まれる、DNA又はRNA又はヌクレオチド中のグアニンが損傷を受けた結果生じる酸化的損傷グアニン化合物を陰イオン交換カラム(HPLC-1)で精製する工程と、予め前記試料中に加えておいたマーカの溶出位置を感知し、適宜、前記試料中に含まれる前記酸化的損傷グアニン化合物の濃度補正物質を検出器で測定する工程と、前記酸化的損傷グアニン化合物を検出器で測定する工程とを有し、前記酸化的損傷グアニン化合物と前記濃度補正物質とを同時に分析することを特徴とする酸化的損傷グアニン化合物の分析方法である。
- [0013] この方法によれば、予め、試料に8-ヒドロキシグアノシン(リボヌクレオシド)(8-OH-rGuo)等の物質を、8-OH-dGの内部標準マーカとして加えているので、酸化的損傷グアニン化合物の、カラムからの溶出位置(時間)、溶出液の分取範囲をより正確に規定することが可能になり、その結果、8-OH-dGを高精度で、且つ再現性よく測定できる。
- [0014] 本発明の第6の発明は、前記酸化的損傷グアニン化合物が、8-ヒドロキシデオキシグアノシン(8-OH-dG)及び／又は8-ヒドロキシグアニン(8-OH-Gua)であり、前記酸化的損傷グアニン化合物の濃度補正物質が、7-メチルグアニン(7-MG)及び／又はクレアチニン(Cre)であり、前記マーカが、8-ヒドロキシグアノシン(リボヌクレオシド)(8-OH-rGuo)である第5の発明に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法である。
- [0015] 本発明の第7、8、及び9の発明は、前記試料が尿であることを特徴とする、それぞれ第1、第3、又は第5の発明に記載の分析方法である。

[0016] 本発明の第10、11、及び12の発明は、前記尿を紙片に滴下して乾燥させたものを再抽出することにより分析する、それぞれ第7、第8、又は第9の発明に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法である。

このような構成をとることにより、どこにいても試料を採取することができ、郵送等により分析機関に大量の試料を効率よく集めることが可能になる。

[0017] 本発明の第13の発明は、前記陰イオン交換カラム(HPLC-1)で精製する工程において、カルボン酸型のカラムおよびカルボン酸又はその塩を含む溶出液を用いる第1乃至12のいずれか一つの発明に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法である。この方法によりHPLC-1における8-OH-dG、8-OH-Guaの溶出位置を重ねることができ両者の同時分析が可能となる。

[0018] 本発明の第14の発明は、前記陰イオン交換カラム(HPLC-1)により精製された前記酸化的損傷グアニン化合物を含む分画を、更に逆相カラム(HPLC-2)により精製する工程;及びHPLC-2により精製された精製酸化的損傷グアニン化合物を検出器で測定する工程;を更に有する第1乃至12の何れか一つの発明に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法である。

この場合、HPLC-1で精製した酸化的損傷グアニン化合物(8-ヒドロキシデオキシグアノシン(8-OH-dG)等)の測定は、陰イオン交換クロマトグラフィーにおいて、(1)リボヌクレオシド8-OH-rGuo等のマーカのピーク認識、(2)一定時間後の8-OH-dG分取開始、(3)一定時間後の8-OH-dG分取終了、(4)適宜、8-OH-dG分画のミキシング、の順序で行い、ついで、逆相カラムへ注入して行うことができる。

本発明の分析装置は、大掛かりな機構を必要とせず、安価で経済性にも優れている。

[0019] 本発明の第15の発明は、1)試料中に含まれる、DNA又はRNA又はヌクレオチド中のグアニンが損傷を受けた結果生じる酸化的損傷グアニン化合物を特異的に吸着する陰イオン交換カラム(HPLC-1);2)前記陰イオン交換カラム(HPLC-1)で精製して得られた酸化的損傷グアニン化合物を含有する分画を、更に精製する逆相カラム(HPLC-2);及び3)前記陰イオン交換カラム(HPLC-1)により酸化的損傷グアニン化合物を含有する分画を得るために用いる検出器、及び前記逆相カラム(HPLC-2)

C-2)で精製して得られた精製酸化的損傷グアニン化合物を測定する検出器;を備えたことを特徴とする酸化的損傷グアニン化合物の分析装置である。

[0020] 本発明の第16の発明は、前記陰イオン交換カラム(HPLC-1)により酸化的損傷グアニン化合物を含有する分画を得るために用いる検出器が、光路の短いセルを備えた検出器である、第15の発明に記載の分析装置である。

[0021] 本発明の第17の発明は、予め試料中に加えておいたマーカのピークシグナルを検出器より受け、一定時間後の酸化的損傷グアニン化合物の溶出時にバルブを開くシグナルを出力し、分取を開始し、更に一定時間後に分取終了シグナルを出力し、次いで、得られた酸化的損傷グアニン化合物を含有する分画を逆相カラム(HPLC-2)へ注入するためのシグナルを出力し、該逆相カラム(HPLC-2)から溶出する前記酸化的損傷グアニン化合物を精製・回収する処理を行わせるための酸化的損傷グアニン化合物の分析機構(制御プログラムを含む)である。

この分析機構(制御プログラムを含む)は、本発明の分析装置において利用することにより、酸化的損傷グアニン化合物の効率的且つ正確な分析を自動化することが可能になる。

発明の効果

[0022] 本発明の分析方法を用いれば、DNA又はRNA又はヌクレオチドの損傷の過程で生成される酸化的損傷グアニン化合物を分析する方法において、DNA又はRNA又はヌクレオチド中のグアニンが損傷を受けた結果生じる酸化的損傷グアニン化合物と、適宜この酸化的損傷グアニン化合物の濃度補正物質とを、(同時に)分析することができる。そのため、試料の採取・保存・分析・データの解析において労力・時間をほぼ半減させることができ、より効率的な酸化的損傷グアニン化合物の分析が可能となる。

また、本発明の分析方法は、高精度で再現性が良く、分析時間も短く、連続運転を行うことにより、大量処理が可能である。

本発明の分析装置は、上記の効果を奏する分析方法を提供することができ、また、安価で経済性に優れている。

尚、本願においては、「酸化的損傷グアニン化合物」には、「酸化的損傷グアニンヌ

クレオシド」及び「酸化的損傷グアニン」の双方が含まれる。

図面の簡単な説明

[0023] [図1]8-OH-dG (8-OH-Gua) と7-MG又はCreとを一時に分析するための装置の一例を示す模式図である。

[図2]8-OH-dG (8-OH-Gua) と7-MG又はCreとを一時に分析するための装置のもう一つの例を示す模式図である。

[図3]マーカである8-OH-rGuoのピークに基づく8-OH-dGの分取と7-MG又はCreの測定の例を示す図である(HPLC-1)。

[図4]本発明の実施に係る8-OH-dGの測定の例を示す図である(HPLC-2)。

[図5]Cre、7-MG、8-OH-Gua、8-OH-dGを一時に分析した例を示す図である。

符号の説明

[0024] 11・・・陰イオン交換カラム(HPLC-1)、12・・・逆相カラム(HPLC-2)、13・・・電気化学検出器、14・・・UV検出器、15・・・スイッチングバルブ、16・・・スイッチングバルブ、17・・・オートサンプラー、27・・・サンプリングインジェクター

発明を実施するための最良の形態

[0025] (DNA、RNA又はヌクレオチドの酸化的損傷化合物)

8-OH-dGをはじめDNA、RNA又はヌクレオチドの酸化的損傷化合物とは、生体内の活性酸素(酸素ラジカル)等によってDNAやRNA又はヌクレオチドが損傷を受けた結果生じるものであり、活性酸素の指標として用いられる。8-OH-dG以外の酸化的損傷化合物としては、2-ヒドロキシデオキシアデノシン(2-OH-dA)、5-ヒドロキシデオキシシチジン(5-OH-dC)、5-ホルミルデオキシウリジン(5-CHO-dU)、8-OH-rGuo、8-ヒドロキシグアニン(8-OH-Gua)等が挙げられる。これら酸化的損傷化合物は、不要物として尿により生体外へ排出される。また、これらのうち8-OH-dG、8-OH-rGuo、8-OH-Gua等の酸化的損傷グアニン化合物は負の電荷を帯びているため、後段で説明する陰イオン交換カラムにより容易に精製、回収することができる。これらの中でも活性酸素の指標として、特に8-OH-dGを用いることが好ましい。なお、本出願(請求項、明細書、等)における酸化的損傷グアニン化合物とは、DNA又はRNA又はヌクレオチド中のグアニンが活性酸素によって損傷を受けた結果生

じる8-OH-dG、8-OH-rGuo、8-OH-Gua等であり、酸化的損傷とはヒドロキシル化されることを示す。

[0026] (試料)

本発明の酸化的損傷グアニン化合物(8-OH-dGを含む)と、適宜この酸化的損傷グアニン化合物の濃度補正物質とを、(一時に)分析する分析方法に使用される試料としては、尿、血清、髄液、唾液、細胞培養後の培地等、全ての生体試料を挙げることができる。これらの中でも、尿は採取し易く、また尿中で酸化的損傷グアニン化合物は安定であるため、特に尿が好ましい。

[0027] 本発明の分析方法、及びこれを実施するための分析装置について説明する。本発明の分析方法は、酸化的損傷グアニン化合物(例えば、8-OH-dG)を精製する工程と、適宜この酸化的損傷グアニン化合物の濃度補正物質(例えば、7-MG又はCre)を測定する工程と、この酸化的損傷グアニン化合物を測定する工程から構成される。また、本発明の分析装置は、上記の精製及び測定を行うための部材からなる。

以下、酸化的損傷グアニン化合物として8-OH-dGを、またこの酸化的損傷グアニン化合物の濃度補正物質として、7-MG及びCreを例にとつて説明する。

[0028] (分析装置)

本発明の実施形態に係る8-OH-dGと、適宜7-MG及び/又はCreとを分析するための装置は、1)8-OH-dGを特異的に吸着する陰イオン交換カラム(HPLC-1)と、2)8-OH-dGの溶出位置の指標となる8-OH-rGuo等のマーカを感知し、7-MG又はCreを測定するUV検出器等の検出器と、3)陰イオン交換カラム(HPLC-1)から得られた8-OH-dGを含有する画分を更に精製する逆相カラム(HPLC-2)と、4)逆相カラム(HPLC-2)から得られた精製8-OH-dGを測定する検出器を具備する。

[0029] 本発明の分析装置の一例の模式図を図1に示す。図中符号11は陰イオン交換カラム(HPLC-1)であり、これはUV検出器14、及びカラムスイッチングバルブ16を介して、逆相カラム(HPLC-2)12と接続している。また、陰イオン交換カラム(HPLC-1)11の上流には、試料を注入するオートサンプラー17が接続されたカラムスイッチングバルブ15が接続している。

また、カラムに吸着した分子を溶出するための溶離液(陰イオン交換カラム(HPLC

-1) 11に用いられる溶離液をA液、逆相カラム(HPLC-2) 12に用いられる溶離液をB液とする)、上記カラムスイッチングバルブ15に接続されたガードカラム(陰イオン交換カラム(HPLC-1) 11と同一の陰イオン交換樹脂を充填)を洗浄するための洗浄液(C液)を各カラムに送り込むためのポンプ21、22、23が設けられ、ポンプ21はオートサンプラー17、ポンプ22はカラムスイッチングバルブ16、ポンプ23はカラムスイッチングバルブ15に各々接続されている。

なお、この例において、オートサンプラー17の代わりに、8-OH-rGuoのピーク感知により、カラムスイッチングバルブ16を自動的に作動させる機能を持つサンプリングインジェクター(「231XL」、ギルソン製)等を用いることができる。

[0030] 本発明の方法の実施において、HPLC-1及びHPLC-2の二つのカラムをカラムスイッチング法により用いる場合には、通常、HPLC-1における酸化的損傷グアニン化合物(例えば8-OH-dG)の標準液を予めHPLC-1に注入し、分取開始時間と、終了時間とを決定しておき、その条件を使用してHPLC-2へ、HPLC-1で精製済みの酸化的損傷グアニン化合物を注入することが必要である。

一方、本発明の方法を実施にあたっては上記のような方法に代えて、231XLに新たなプログラムを搭載して測定を行うこともできる。このプログラムは、(1)リボスクレオシド8-OH-rGuo等のマーカのピーク認識、(2)一定時間後の8-OH-dG分取開始、(3)一定時間後の8-OH-dG分取終了、(4)HPLC-2への注入を行うものであり(図3を参照)、予め、8-OH-dG等の酸化的損傷グアニン化合物の分取範囲(時間)を設定しておく必要がない。より詳しくは、以下のフローにより機能を実現している。

- (1) 231XLにより試料をHPLC-1に注入する。
- (2) 設定時間(T1)だけシステムを待機させる。
- (3) 231XLがUV検出器シグナルのモニターを開始する。
- (4) 設定UVレベルを超える(ピーク感知)まで、システムを待機させる。
- (5) ピーク感知後、設定時間(T2)だけシステムを待機させた後、バルブへ接点信号を出力し、ループ内に分取を開始する。
- (6) 設定時間(T3)後、バルブへ接点信号を出力し、分取を終了させると同時にループ内の分画をHPLC-2に注入する。

後段でも説明するが、サンプリングインジェクター(「231XL」、ギルソン製)に使用することにより、8-OH-rGuo等のマーカとの相対的位置により自動的に8-OH-dGの分取範囲(時間)が決定されるため、予め、8-OH-dGの分取範囲(時間)を設定しておく必要がない。

- [0031] 上記陰イオン交換カラム(HPLC-1)11は、試料中に含まれる8-OH-dGを特異的に吸着するので回収率が非常に高く、且つほとんどの夾雑物を取り除くことができるため、不純物の少ない画分を得ることができる。また、上述したように、陰イオン交換カラム(HPLC-1)11によれば、負の電荷を帯びている8-OH-rGuo、8-OH-Gua等の酸化的損傷グアニン化合物においても、容易に精製、回収することができる。陰イオン交換カラム(HPLC-1)11としては、陰イオン交換樹脂を充填剤としたものであれば、特に制限はない。具体的な充填剤としては、スチレンジビニルベンゼン系ポリマーに4級アンモニウム基が結合したもの、ポリヒドロキシメタクリレート系ポリマーに4級アンモニウム基が結合したもの等が挙げられる。また、市販品の充填剤としては、アミネックスHPX-72S(BioRad製)、Shodexカラム充填剤(昭和電気(株)製)、MCI GEL CAO8F(三菱化成(株)製)、ハミルトンRCX-10)等を挙げることができる。

また、陰イオン交換樹脂の粒子径としては、現在7 μ mのものにより良好な結果が得られているが、更に小粒子径(3~5 μ m)の陰イオン交換樹脂をカラムに用いることにより、より分離能が高くなり、その結果、カラム長を短くできて、分析時間を短縮することも可能である。

- [0032] 上記陰イオン交換樹脂を充填するカラムの内径は、特に制限はないが、約1mm~1.5mm程度であることが好ましい。また、カラムの内径が2.0~4.6mmの場合は、図2に示すように、カラムスイッチングバルブ16に接続したサンプリングインジェクター27(「233XL」、ギルソン製等)を用いて、8-OH-rGuo等のマーカのピーク認識により、8-OH-dGを含有する画分を自動的に逆相カラム(HPLC-2)12に注入することが好ましい。なお、この方法を実施するために、233XLに新たなプログラムを搭載して測定を行った。このプログラムは、(1)リボヌクレオシド8-OH-rGuo等のマーカのピーク認識、(2)一定時間後の8-OH-dG分取開始、(3)一定時間後の8-OH-dG

分取終了、(4) 8-OH-dG 分画のミキシング、(5) HPLC-2 への注入を行うものであるが、より詳しくは以下のフローにより機能を実現している。

- (1) 233XL により試料を HPLC-1 に注入する。
- (2) 設定時間 (T1) だけシステムを待機させる。
- (3) 233XL が UV 検出器シグナルのモニターを開始する。
- (4) 設定 UV レベルを超える (ピーク感知) まで、システムを待機させる。
- (5) ピーク感知後、設定時間 (T2) だけシステムを待機させた後、233XL バイアルチューブ内に分取を開始する。
- (6) 設定時間 (T3) 後、分取を終了させる。
- (7) 得られた分画を吸引、吐出により攪拌する。
- (8) 分画の一部を HPLC-2 に注入する。

上記陰イオン交換樹脂を充填するカラムの長さは、特に制限はないが、陰イオン交換樹脂の粒子径、交換容量等によって、カラムを短くすることが可能であり、分析時間を短縮することができる。

- [0033] 上記光路の短いセルを具備した UV 検出器 14 は、陰イオン交換カラム (HPLC-1) 11 から溶出される画分をモニターし、試料中に含まれる 8-OH-rGuo の溶出位置を感知する。このように、8-OH-rGuo の溶出位置を当該 UV 検出器 14 でモニターすることによって、正確な 8-OH-dG の溶出時間が把握でき、それに合わせてカラムスイッチングバルブ 16 を作動させることにより、確実に 8-OH-dG を含有する画分を分取することができる。

これと同時に、光路の短いセルを具備した当該 UV 検出器 14 は、検出器の UV 波長を調整することにより、試料中の 7-MG 又は Cre を測定することができる。

- [0034] 上記逆相カラム (HPLC-2) 12 は、陰イオン交換カラム (HPLC-1) 11 から得られた 8-OH-dG を含有する画分を更に精製するものであり、逆相カラムの性質を有するものであれば、特に制限はない。市販品としては、YMC-Pack ODS-AM (S-5 μ m) (YMC 社)、Shiseido Capcell Pak C18 MG (S-5 μ m) ((株) 資生堂製) 等が挙げられる。

- [0035] 上記検出器 13 は、逆相カラム (HPLC-2) から得られた精製 8-OH-dG を測定する

ものであり、逆相カラム(HPLC-2)12の下流に設けられている。上記検出器13としては、電気化学検出器(ECD)、液体クロマトグラフィー質量分析装置(LCMS)等を用いることができる。また、上記電気化学検出器(ECD)に関しては、2種類の設定電圧を選ぶことにより、8-OH-dGのピークは固有の比率で表れるため(図4)、そのピークが8-OH-dGであることを確認できる。

[0036] また、本発明の実施形態に係る8-OH-dGと7-MG又はCreを同時に分析するための分析装置は、連続運転を行うことにより大量の試料を処理することが可能である。その場合、ガードカラム35の洗い洗浄液(C液)は、0.5M硫酸アンモニウム:アセトニトリル=7:3程度の組成であることが好ましい。

[0037] 以上説明したように、本発明の実施形態に係る8-OH-dGと7-MG又はCreを同時に分析するための分析装置によれば、陰イオン交換カラム(HPLC-1)11が試料中に含まれる8-OH-dGを特異的に吸着し、試料中に含まれる夾雑物の大半を一度に取り除くことができる。

また、UV検出器14によって、8-OH-rGuo等のマーカの溶出位置に基づき、確実に精製8-OH-dGを分取する方法は、回収率、再現性に優れているといえる。この光路の短いUV検出器14は、検出器のUV波長を調整することにより、同時に8-OH-dGの濃度補正物質である7-MG又はCreをも測定することができる。このため、本実施形態の分析装置は、8-OH-dGと、7-MG又はCreとを同時に分析することも可能である。

また、連続運転を行うことにより大量の試料を処理することができる。また、上述した分析装置は比較的安価なため経済性にも優れている。

[0038] (分析方法)

以下、図1に示す分析装置を用いて8-OH-dGと、7-MG又はCreとの分析方法について説明する。(分取範囲(時間)の決定)8-OH-dGと8-OH-rGuoと尿との混合物を図1示す分析装置に注入し、予め、8-OH-dGの分取範囲を決定しておく。

分取範囲を予め決定しておくことにより、8-OH-dGの正確な溶出時間が把握でき、それに合わせてカラムスイッチングバルブ16を作動させるように設定することで、確実に8-OH-dGを含有する画分を分取することができる。なお、上述したように、図1

において、オートサンプラー17の代わりに、サンプリングインジェクター(231XL)を用いた場合は、ピーク感知により8-OH-rGuoとの相対的位置により自動的に8-OH-dGの分取範囲(時間)が決定されるため、分取範囲(時間)の設定をしておく必要がない。

[0039] (精製方法)

本発明の実施形態に係る8-OH-dGの精製方法は、試料を陰イオン交換クロマトグラフィーによって精製する第1の精製工程を有することを特徴とする。また、上述したように、8-OH-dGのみならず、8-OH-rGuo、8-OH-Gua等の負の電荷を有する酸化的損傷グアニン化合物においても、陰イオン交換クロマトグラフィーによって容易に精製、回収することができる。

第1の精製工程における溶出条件としては、カラム温度は50～65℃、内径1mmのカラムの場合、流速が17～25 μ l/minとすることが好ましい。また、8-OH-dG、8-OH-Guaの同時分析のためには、第1の精製工程における溶出液としては、カルボン酸、例えばギ酸、酢酸、プロピオン酸(又はそれらの塩)を含むものを挙げることができる。中でも酢酸を含むものが好ましい。

[0040] また、本発明の8-OH-dGの精製方法は、予め、試料に8-OH-rGuo等を8-OH-dGの内部標準マーカとして加えて、精製を行うことが可能である。8-OH-rGuoを試料中に予め添加しておく、8-OH-rGuoが溶出された後、一定時間後に8-OH-dGが溶出されるため、8-OH-rGuoの溶出位置をUV検出器14でモニターすることによって、正確な8-OH-dGの溶出位置(時間)が把握でき、確実に8-OH-dGを含有する画分を分取することができる。

[0041] また、本発明の8-OH-dGの精製方法は、予め、試料に8-OH-rGuo等を8-OH-dGの内部標準マーカとして加えて、陰イオン交換クロマトグラフィーによる第1の精製工程を行い、第1の精製工程で得られた8-OH-dGを含有する画分を更に精製すること(第2の精製工程)が好ましい。

上記第2の精製工程としては、逆相クロマトグラフィーにより精製することが好ましい。逆相クロマトグラフィーに用いられる溶出液(B液)、温度条件等は、使用する逆相カラム(HPLC-2)12によって異なるため、それらは適宜決定される。例えば、逆相カ

ラムとして、YMC-Pack ODS-AM(S-5 μ m)(YMC社)を用いてヒト尿を分析する場合は、カラム温度が約40℃、流速が0.9ml/min程度とすることが好ましい。

[0042] (測定方法)

本発明の実施形態に係る8-OH-dGの測定方法は、上述した精製方法によって得られた精製8-OH-dGの量を測定する測定工程を有し、上述した電気化学検出器(ECD)、液体クロマトグラフィー質量分析装置(LCMS)等を用いて精製8-OH-dG量を測定できる。なお、上記測定方法は、8-OH-dGのみならず、8-OH-rGuo(マーカーとして加えない場合)、8-OH-Gua等の酸化的損傷グアニン化合物の測定にも適用できる。

また、連続運転を行う場合、図1に示すようなオートサンプラー17を具備した装置においても、図2に示すようなサンプリングインジェクター27を具備した装置においても、定期的に8-OH-dGの溶出位置をチェックすることが好ましい。

[0043] 本発明の実施形態に係る7-MG又はCreの測定は、注入した試料中の7-MG又はCreをUV検出器14によって測定する。

試料がマウスやラットの尿である場合は、7-MG測定のためのUV検出器の波長は254nmとしてよい。試料がヒトの尿である場合は、夾雑物と7-MGを区別するため、UV検出器の波長は254nmよりも長波長として、好ましくは、300～310nmとする。Cre測定のためには、波長を235～260nm、好ましくは245nmとし、光路の短い(好ましくは0.2mm程度)セルを用いる。光路の短いセルの光路の長さとしては、0.1～1mm程度の範囲とすることができる。

[0044] 本発明の実施形態に係る分析方法においては、試料として尿を用いる場合、次の様な利点がある。

即ち、尿をろ紙片などに滴下し、尿を乾燥させる。ついで、この乾燥したろ紙片から尿を再抽出し、尿を分析する。

このようにすれば、尿はいずれの場所においても採取でき、乾燥したろ紙片を分析機関に郵送などの方法で送ることにより、大量の試料を効率よく分析することができる。

[0045] 以上説明したように、本発明の実施形態に係る分析方法によれば、UV検出器14

のUV波長を調整することにより、試料中の7-MG又はCreを測定することができ、これにより、8-OH-dGと、この濃度補正物質である7-MG又はCreとを同時に分析することができる。

本発明の分析方法では、8-OH-dGを回収率良く得られる。更に、第1の精製工程における陰イオン交換カラム(HPLC-1)の流速が微量であるため、溶離液(A液)、洗浄液(C液)の消費が極めて少なく、精製後の廃液量も少量で済むため、環境保全の面からも好ましい。本発明の8-OH-dGの精製方法によれば、確実に精製8-OH-dGを分取でき、8-OH-dGのピーク付近において夾雑物がほとんどない画分を得ることができる。また、連続運転を行っても、8-OH-rGuo等のマーカのピークを感知させる方法を用いれば、サンプル毎の分取範囲のズレに対応して、確実に8-OH-dGを含有する画分を分取することができる。また、本発明の測定方法は、上記精製方法によって得られた精製8-OH-dG又は8-OH-Gua等の精製酸化的損傷グアニン化合物を測定するので、非常に精度が高く、再現性を有する。また、連続運転を行うことにより大量処理が可能である。

[0046] なお、本発明の分析方法では、7-MGを定量的に測定することができる。7-MGは、タバコ煙中の発癌物質によりDNA中に生じるとされ、本分析方法は発癌リスク評価の方法としても応用できる可能性がある。本発明の分析方法においては、7-MGを濃度補正に用いる場合、正確には喫煙による7-MGの増加分を差し引くことが好ましい。

[0047] なお、本発明の技術範囲は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。例えば、溶離液(A液、B液)、洗浄液(C液)の組成等は、使用するカラム(充填剤)により適宜変更可能である。

本発明の酸化的損傷グアニン化合物の測定方法は、例えば、個人個人の発癌リスクの評価、活性酸素関連の様々な疾患(糖尿病等)の予測・診断、老化度、あるいは一般的健康の評価に用いることができる。

上記測定方法により得られた結果の評価方法として、例えば8-OH-dGの場合、8-OH-dG標準溶液を随時、尿試料の他に分析装置に注入し、そのピーク面積との

比較により算出された試料中の8-OH-dG濃度を、UV検出器によって同時に測定された7-MG又はCreの濃度で割った値として算出する。

実施例

- [0048] 以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

(尿試料の調製)

ヒトの尿を1mlずつ2本のエッペンドルフチューブに取り、 -20°C で凍結した。凍結した尿を解凍して均一な液とした後、その100 μl を取り、微酸性溶液(組成;0.6mM硫酸を96ml、アセトニトリル4ml)で2倍に希釈し、8-OH-rGuoを12 μg 加えた。更に2M酢酸ナトリウム(pH4.5)を6.7 μl 加え、pHを7以下にした。これをよく攪拌し、 5°C で2〜3時間冷却後、15000回転、5分間遠心分離を行い、その上清を尿試料とした。なお、遠心した尿を直接231XL等のサンプリングインジェクターにセットし、希釈、ミクシング、注入を自動化することも可能である。

- [0049] (8-OH-dGの精製・分画と7-MG又はCreの測定)

この尿試料20 μl を陰イオン交換カラム(MCI GEL CA08F、粒径7 μm 、sulfate型)内径1.5mm、ガードカラムの長さ4cm、本カラムの長さ12cm)によって精製した。カラムの温度は65度とし、流速は50 $\mu\text{l}/\text{分}$ とし、溶出液は0.3mMの硫酸(2%アセトニトリルを含む)を用いた。

この分離により、UV検出器(「UV/VIS-155」、ギルソン製)(吸光波長305nm及び245nm)を用いて、それぞれ7-MGとCreを検出した。この分析における8-OH-rGuoピーク認識は、305nmにより行った。検出の結果を図3に示す。

- [0050] 図3に示すように、7-MGとCreのピークが検出され、本実施例により、7-MGとCreが測定できることが分かった。また、8-OH-dGは、8-OH-rGuoの溶出から一定の時間差を置いて溶出された。そのため、8-OH-rGuoの溶出をモニターすることにより、正確な8-OH-dGの溶出位置を把握でき、確実に8-OH-dGを有する画分を得ることが可能であることが分かった。

- [0051] (8-OH-dGの精製と測定)

上記の、陰イオン交換クロマトグラフィーにより得た8-OH-dGを含有する画分を自

動的に逆相クロマトグラフィーに注入した。なお、逆相カラムとして、Shiseido Capcell Pak C18 MG (S-5 μ m) (250 x 4.6mm)を用い、10mMリン酸緩衝液(pH6.7;これは0.1Mリン酸緩衝液(pH6.7)を希釈して調製したものであり、pHは多少異なる)、5%メタノール(MeOH)溶離液(B液)を用い、カラム温度は40℃、流速1ml/minとした。その分離パターンを図4に示す。なお、この分離パターンは、電気化学検出器(「ESA Coulochem II」、ESA社)(電圧:ガードセル350mV;チャンネル1、170mV;チャンネル2、300mV)を用いて検出した。

[0052] 図4に示すように、8-OH-dGのピークが検出され、本実施例により、8-OH-dGが測定できることが分かった。

上記図3により得られた7-MG又はCreのピークの面積と、図4より得られた8-OH-dGのピークの面積から、(8-OH-dG/7-MG)又は(8-OH-dG/Cre)の値を算出し、これをもって、酸化的DNA損傷の指標とすることができる。

[0053] (8-OH-dG及び8-OH-Guaの同時分析)

遠心したヒト尿をサンプリングインジェクター231XLにセットし8-OH-rGuo(120mg/ml)を含む微酸性希釈液(組成;125 mM酢酸ナトリウム(pH4.5)溶液99ml;アセトニトリル1ml)で自動的に希釈(1:1)、ミクシング、HPLC-1への注入(20 μ l)を行った。カラムは陰イオン交換カラム(MCI GEL CA08F、粒径7 μ m、acetate型;内径1.5mm、ガードカラムの長さ4cm、本カラムの長さ12cm)を用い、カラム温度は55℃とし、流速は50 μ l/分とし、溶離液は0.5%アセトニトリルを含む5mM酢酸を用いた。8-OH-rGuoのピーク認識により分取された8-OH-dG、8-OH-Gua分画は自動的にHPLC-2に注入された。カラムはInnertsil ODS-3、粒径3 μ m、内径4.6mm、長さ25cm(GL Sciences Inc.)を用い、カラム温度は30℃とし、流速は0.7ml/分とし、溶離液はEDTA・3Na塩・3水和物(50mg/l)および8%メタノールを含む10mMリン酸二水素ナトリウム溶液を用いた。なおこの分析例においてはECDはエイコム社(京都)製ECD-300を用いた(設定電圧、550mV)。

結果を図5に示した。

産業上の利用可能性

[0054] 本発明の分析方法は、尿等の生体物質の分析業界において用いることができる。

本発明の分析装置は、分析機器の業界において用いることができる。

請求の範囲

- [1] 試料中に含まれる、DNA又はRNA又はヌクレオチド中のグアニンが損傷を受けた結果生じる酸化的損傷グアニン化合物を陰イオン交換カラム(HPLC-1)で精製する工程と、
前記酸化的損傷グアニン化合物を検出器で測定する工程とを有することを特徴とする酸化的損傷グアニン化合物の分析方法。
- [2] 前記酸化的損傷グアニン化合物が、8-ヒドロキシデオキシグアノシン(8-OH-dG)及び／又は8-ヒドロキシグアニン(8-OH-Gua)である請求項1記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法。
- [3] 試料中に含まれる、DNA又はRNA又はヌクレオチド中のグアニンが損傷を受けた結果生じる酸化的損傷グアニン化合物を陰イオン交換カラム(HPLC-1)で精製する工程と、
前記試料中に含まれる、前記酸化的損傷グアニン化合物の濃度補正物質を検出器で測定する工程と、
前記酸化的損傷グアニン化合物を検出器で測定する工程とを有し、
前記酸化的損傷グアニン化合物と前記濃度補正物質とを一時に分析することを特徴とする酸化的損傷グアニン化合物の分析方法。
- [4] 前記酸化的損傷グアニン化合物が、8-ヒドロキシデオキシグアノシン(8-OH-dG)及び／又は8-ヒドロキシグアニン(8-OH-Gua)であり、
前記酸化的損傷グアニン化合物の濃度補正物質が、7-メチルグアニン(7-MG)及び／又はクレアチニン(Cre)である請求項3に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法。
- [5] 試料中に含まれる、DNA又はRNA又はヌクレオチド中のグアニンが損傷を受けた結果生じる酸化的損傷グアニン化合物を陰イオン交換カラム(HPLC-1)で精製する工程と、
予め前記試料中に加えておいたマーカの溶出位置を感知し、適宜、前記試料中に含まれる前記酸化的損傷グアニン化合物の濃度補正物質を検出器で測定する工程と、

前記酸化的損傷グアニン化合物を検出器で測定する工程とを有し、

前記酸化的損傷グアニン化合物と前記濃度補正物質とを一時に分析することの特徴とする酸化的損傷グアニン化合物の分析方法。

- [6] 前記酸化的損傷グアニン化合物が、8-ヒドロキシデオキシグアノシン(8-OH-dG)及び／又は8-ヒドロキシグアニン(8-OH-Gua)であり、
前記酸化的損傷グアニン化合物の濃度補正物質が、7-メチルグアニン(7-MG)及び／又はクレアチニン(Cre)であり、
前記マーカが、8-ヒドロキシグアノシン(リボヌクレオシド)(8-OH-rGuo)である請求項5に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法。
- [7] 前記試料が尿である請求項1に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法。
- [8] 前記試料が尿である請求項3に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法。
- [9] 前記試料が尿である請求項5に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法。
- [10] 前記尿を紙片に滴下して乾燥させたものを再抽出することにより分析する請求項7に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法。
- [11] 前記尿を紙片に滴下して乾燥させたものを再抽出することにより分析する請求項8に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法。
- [12] 前記尿を紙片に滴下して乾燥させたものを再抽出することにより分析する請求項9に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法。
- [13] 前記陰イオン交換カラム(HPLC-1)で精製する工程において、カルボン酸型のカラムおよびカルボン酸又はその塩を含む溶出液を用いる請求項1乃至12のいずれか一項に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法。
- [14] 前記陰イオン交換カラム(HPLC-1)により精製された前記酸化的損傷グアニン化合物を含む分画を、更に逆相カラム(HPLC-2)により精製する工程；及び
HPLC-2により精製された精製酸化的損傷グアニン化合物を検出器で測定する工程；
を更に有する請求項1乃至12の何れか一項に記載の酸化的損傷グアニン化合物の分析方法。
- [15] 1) 試料中に含まれる、DNA又はRNA又はヌクレオチド中のグアニンが損傷を受け

た結果生じる酸化的損傷グアニン化合物を特異的に吸着する陰イオン交換カラム(HPLC-1)；

2) 前記陰イオン交換カラム(HPLC-1)で精製して得られた酸化的損傷グアニン化合物を含有する分画を、更に精製する逆相カラム(HPLC-2)；及び

3) 前記陰イオン交換カラム(HPLC-1)により酸化的損傷グアニン化合物を含有する分画を得るために用いる検出器、及び前記逆相カラム(HPLC-2)で精製して得られた精製酸化的損傷グアニン化合物を測定する検出器；

を備えたことを特徴とする酸化的損傷グアニン化合物の分析装置。


[16] 前記陰イオン交換カラム(HPLC-1)により酸化的損傷グアニン化合物を含有する分画を得るために用いる検出器が、光路の短いセルを備えた検出器である、請求項15記載の分析装置。

[17] 予め試料中に加えておいたマーカのピークシグナルを検出器より受け、一定時間後の酸化的損傷グアニン化合物の溶出時にバルブを開くシグナルを出力し、分取を開始し、


更に一定時間後に分取終了シグナルを出力し、

次いで、得られた酸化的損傷グアニン化合物を含有する分画を逆相カラム(HPLC-2)へ注入するためのシグナルを出力し、該逆相カラム(HPLC-2)から溶出する前記酸化的損傷グアニン化合物を精製・回収する処理を行わせるための酸化的損傷グアニン化合物の分析機構(制御プログラムを含む)。


[図1]

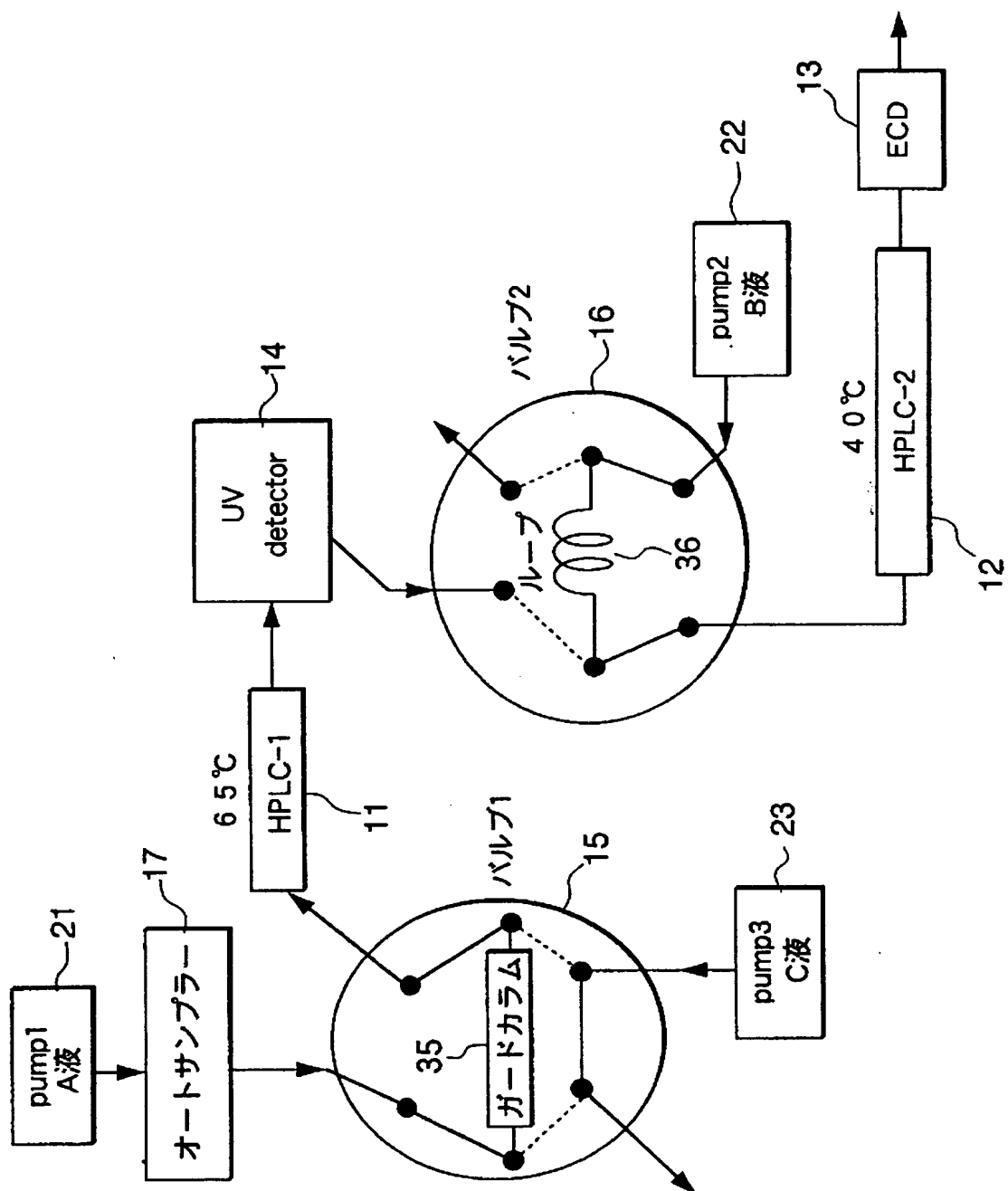


[図2]

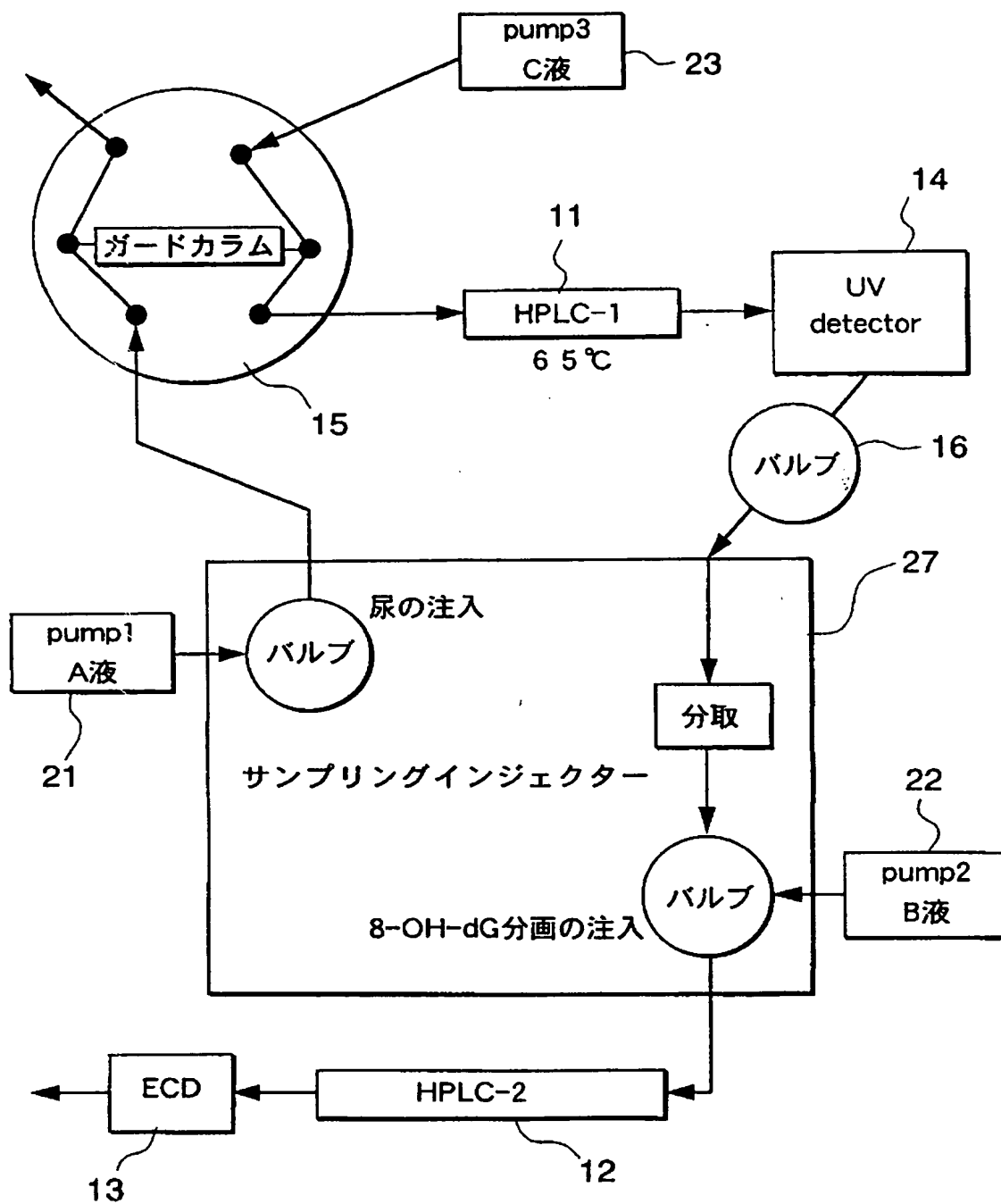


[図3]

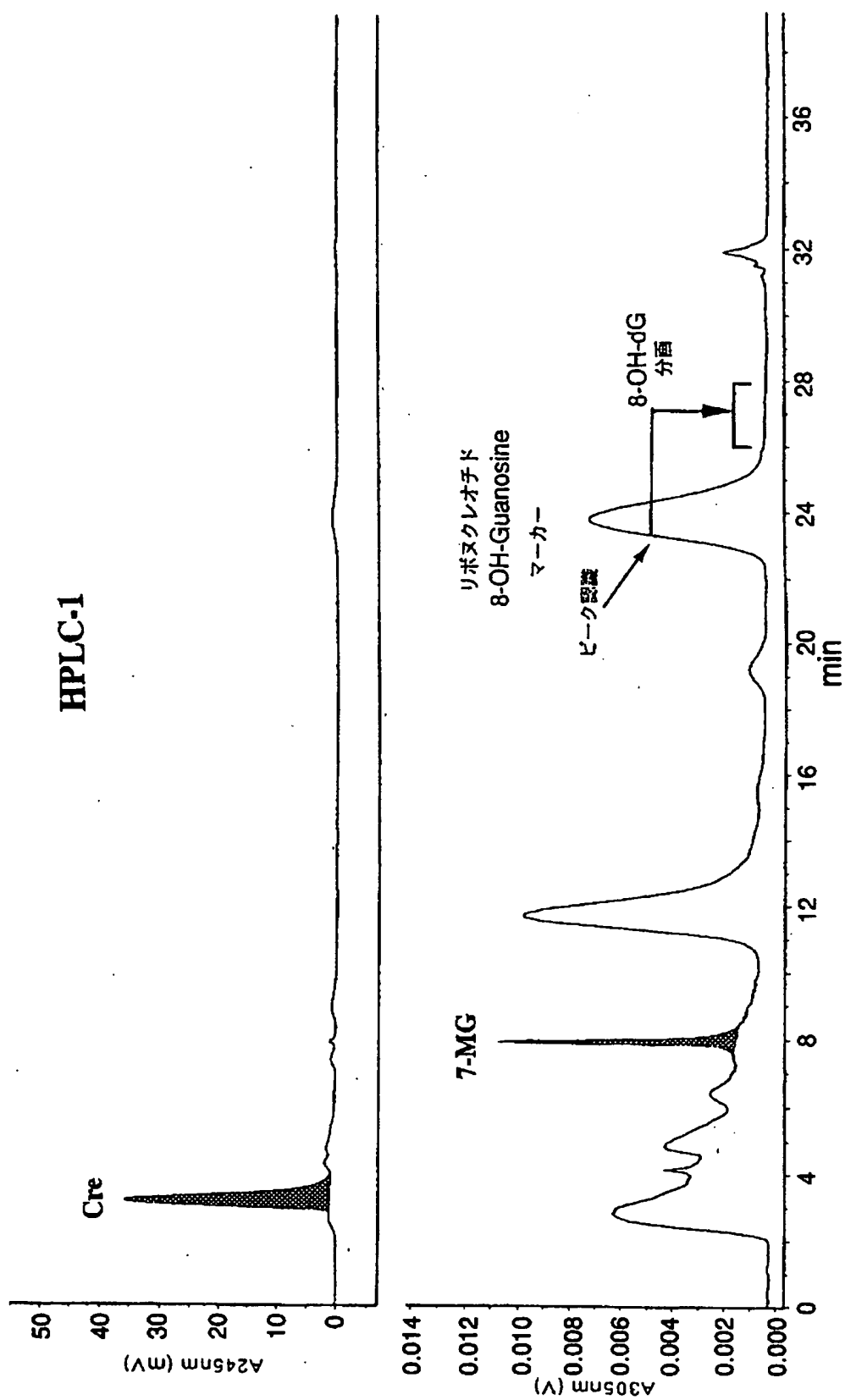

[図4]

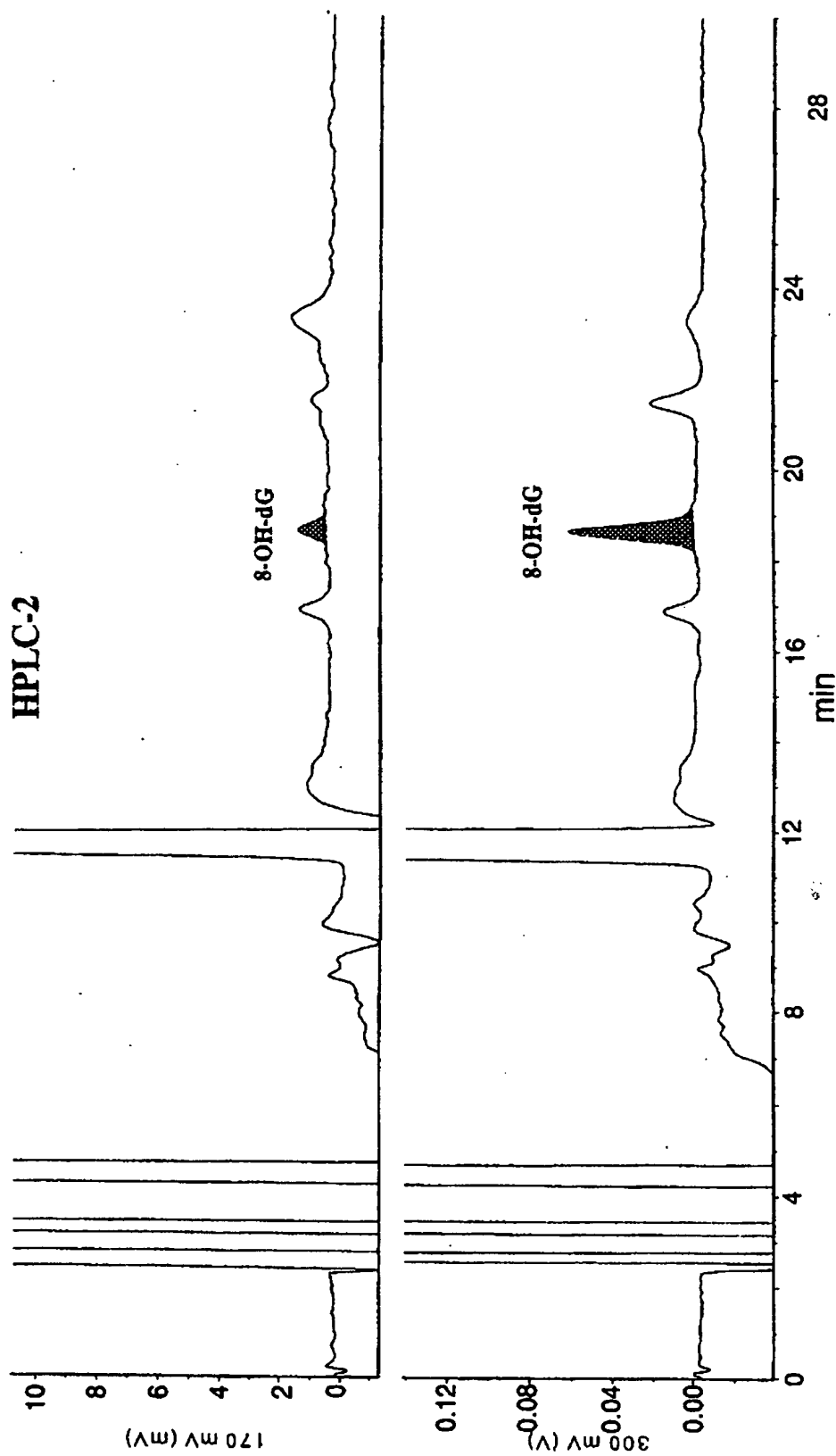

[図5]

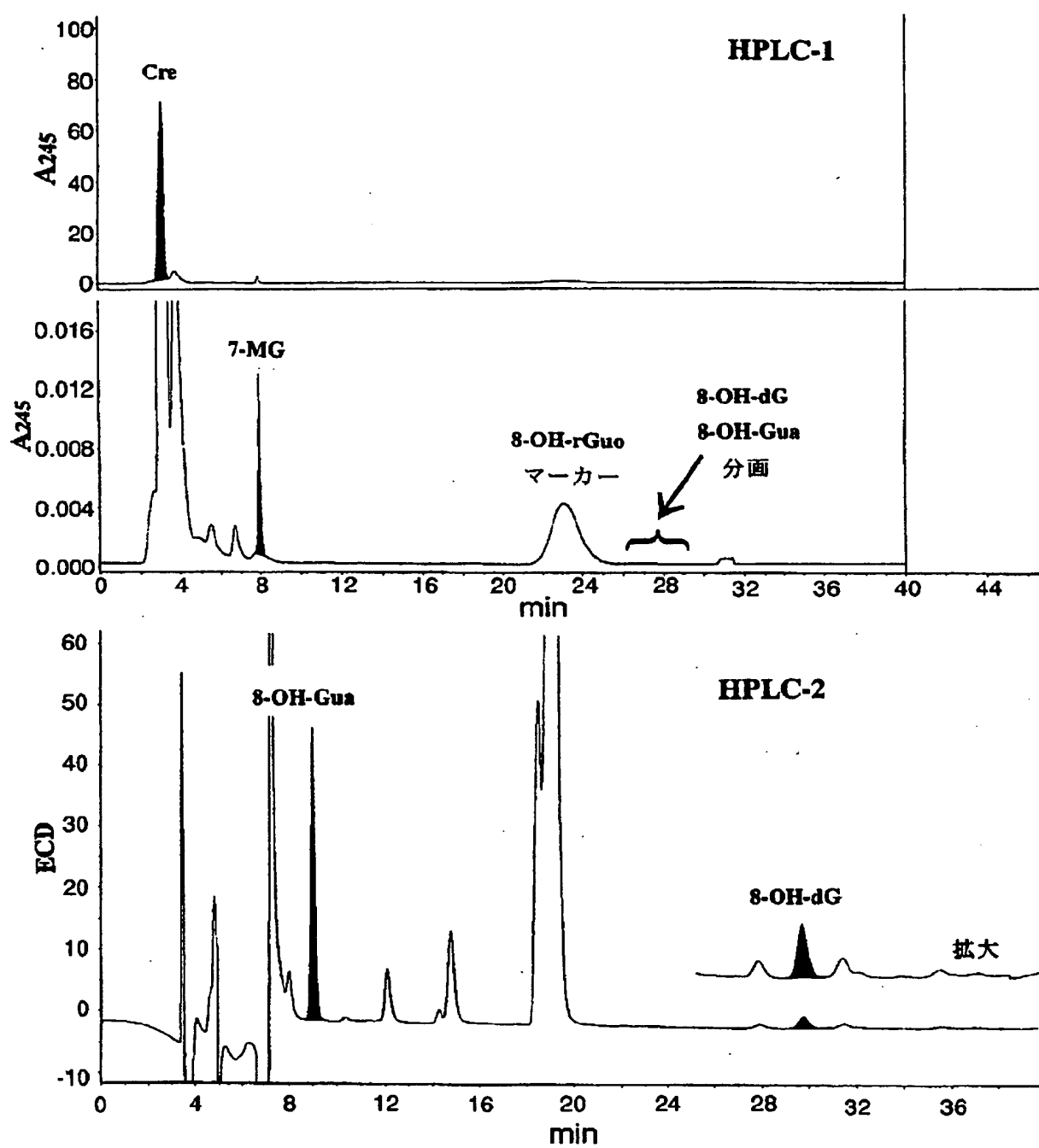

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/015826

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ G01N30/88, G01N30/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ G01N30/88, G01N30/02

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 8-189929 A (Nikken Foods Co., Ltd.),	1, 2, 7, 13-17
Y	23 July, 1996 (23.07.96),	10
A	(Family: none)	3-6, 8, 9, 11, 12
Y	WO 00/39579 A (FLEXSITE DIAGNOSTICS, INC.),	10
A	06 July, 2000 (06.07.00), & JP 2002-533722 A & EP 1141706 A	8, 9, 11, 12
X	JP 2000-310625 A (Sumitomo Pharmaceuticals Co., Ltd.), 07 November, 2000 (07.11.00), (Family: none)	14-17

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
22 March, 2005 (22.03.05)

Date of mailing of the international search report
12 April, 2005 (12.04.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl¹ G01N30/88, G01N30/02

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl¹ G01N30/88, G01N30/02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2004年

日本国登録実用新案公報 1994-2004年

日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 8-189929 A (日研フード株式会社) 1996. 07. 23	1, 2, 7, 13-17
Y	(ファミリーなし)	10
A		3-6, 8, 9, 11, 12
Y	WO 00/39579 A (FLEXSITE DIAGNOSTICS, INC) 2000. 07. 06	10
A	& JP 2002-533722 A & EP 1141706 A	8, 9, 11, 12

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

22. 03. 2005

国際調査報告の発送日

12. 4. 2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

竹中 靖典

2J

9507

電話番号 03-3581-1101 内線 3251

C (続き). 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2000-310625 A (住友製薬株式会社) 200 0.11.07 (ファミリーなし)	14-17